

药典中桉油精测定

-----东立龙应用中心

一、标准信息

药典中桉油精的测定

二、仪器

安捷伦 GC8890, FID 检测器

三、色谱柱

名称: CBX-WAX

最高使用温度: 260/280℃

柱长:30m 内径: 0.25mm 膜厚: 0.25μm

四、色谱条件

柱温: 80℃ (0min) to 5℃/min 120℃ (0min) at 10℃/min to 180℃ (3.5min) at 20℃/min to 230℃ (2min)

汽化温度: 250℃

检测器: FID

检测温度: 300℃


进样量: 1μL

柱流量: 1.0ml/min

分流比: 10: 1

五、实验结果

混合标品+内标

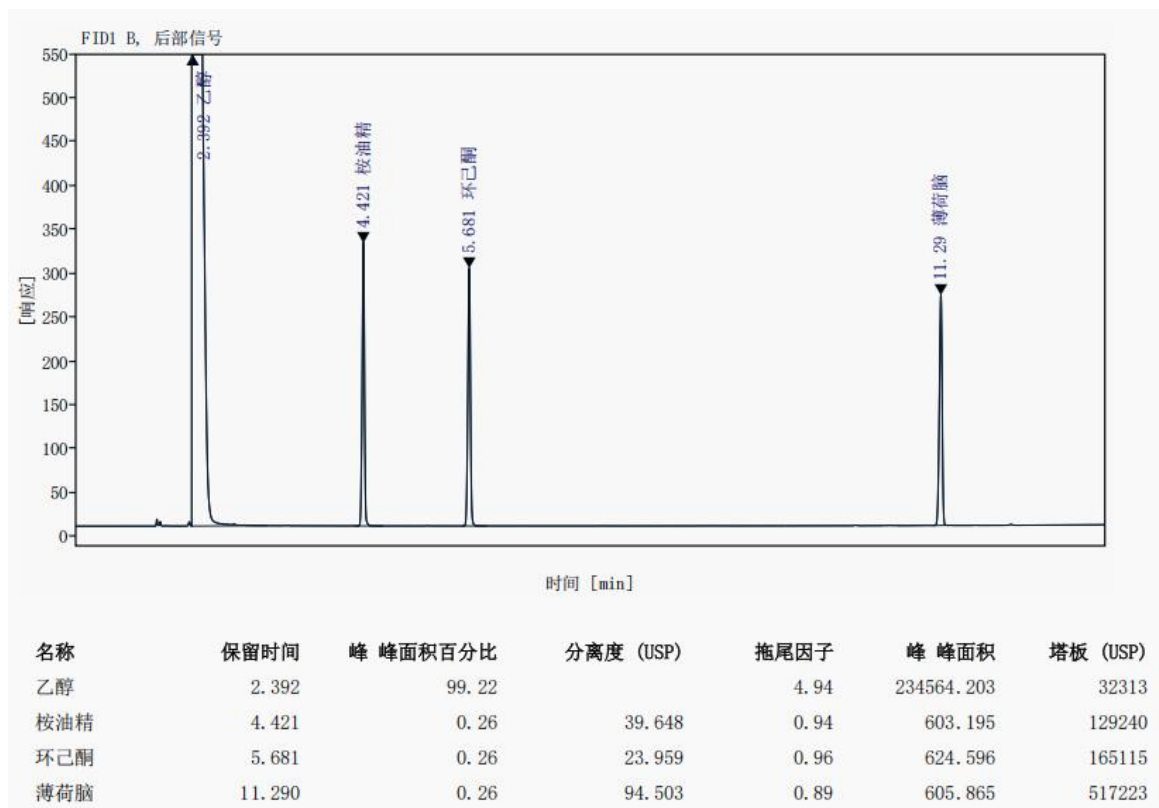

供试品+内标

