



山东联众分析仪器有限公司

电话: 0932-3973766 传真: 0632-3973878 网址: www.lz17.com 邮箱: sdlz17@163.com

采用 **LC-3000** 高效液相色谱仪分析饲料中的喹乙醇


色谱仪器: LC-3000 高效液相色谱仪 (山东联众分析仪器有限公司)

色谱柱: C18 (4.6mm×200mm 5 μm)

流动相: 甲醇/水 15/85 (V/V) 磷酸调 pH=2.8 流速: 1mL/min

检测器: 紫外检测器 波长 260nm

10 μ/mL 的喹乙醇标样图谱如下:

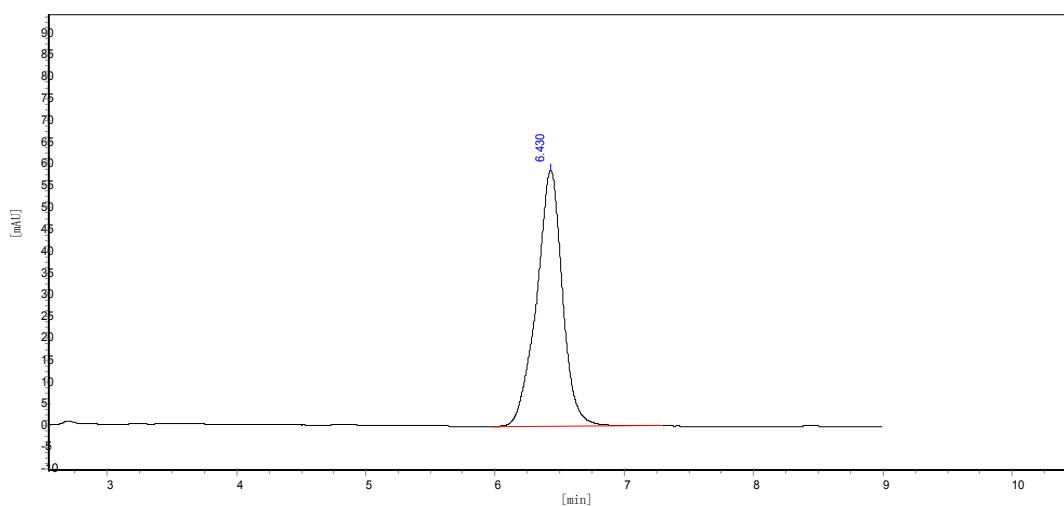

某饲料样品图谱如下:

