

莎稞磷分析方法

一、

色谱柱: Sunniest C8 (250*4.6mm, 5 μ m);

流动相: 乙腈-水 (60:40)。

流速: 1.0ml/min。


波长: 254nm。

柱温: 30℃。


进样量: 5 μ l。

溶剂: 乙腈;

标样图谱

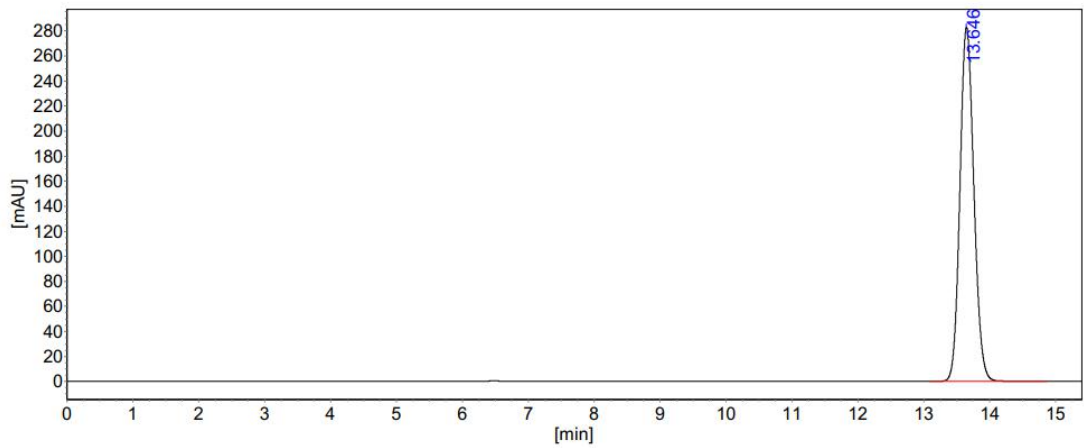

样品图谱

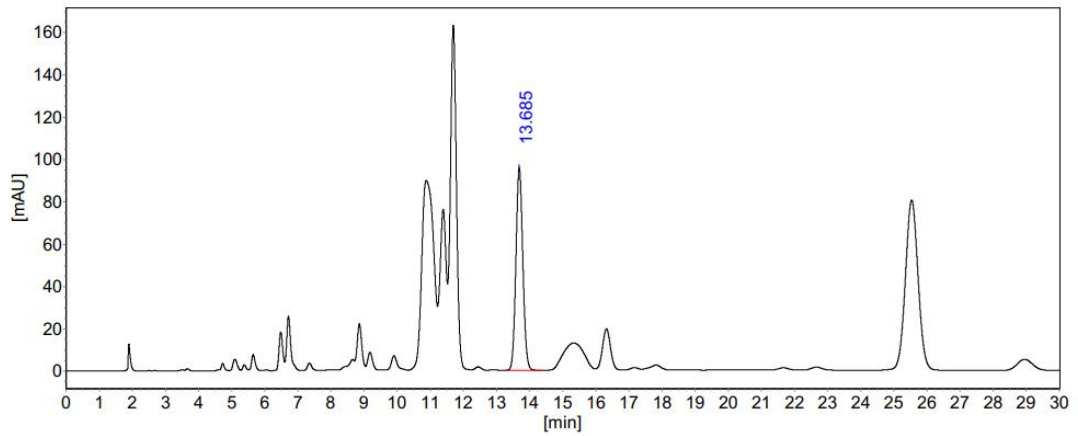

二、

色谱柱: YMC Triart C18 (250*4.6mm, 5 μ m);

流动相: 乙腈-水 (60:40)。

流速: 1.0ml/min。


波长: 254nm。

柱温: 30℃。

进样量: 5 μ l。

溶剂: 乙腈;

标样图谱

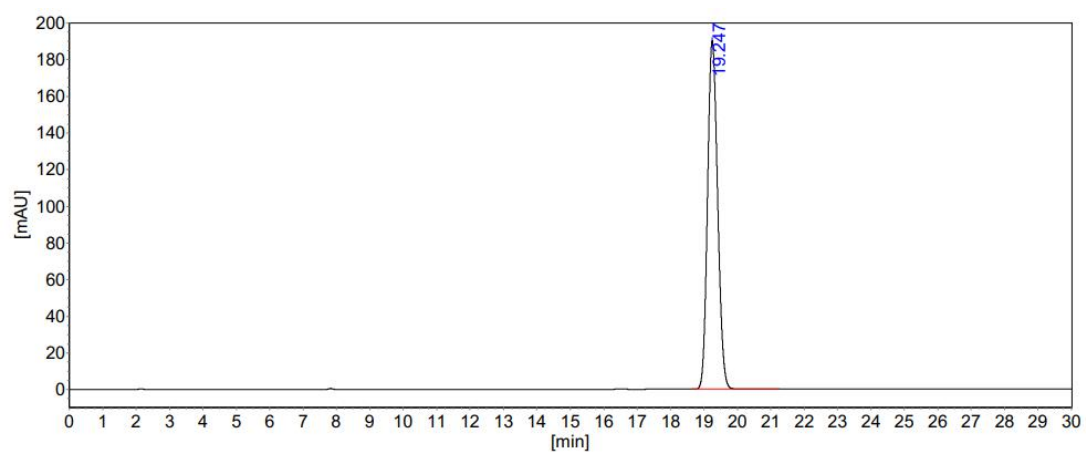

样品图谱

