

苦水玫瑰精油提取液样品分析报告

1、色谱柱

色谱柱: CBX-WAX

最高使用温度: 260/280℃

货号: CH3124

柱长:60m 内径: 0.32mm 膜厚: 0.5 μm

2、色谱条件

柱温: 60℃ (1min) to 255℃ (10min) at5℃/min 汽化温度: 260 °C


检测器: FID 检测温度: 260 °C

柱流量: 1.2ml/min 分流比: 30:1


进样量: 1ul

3、实验结果


样品: 提取液

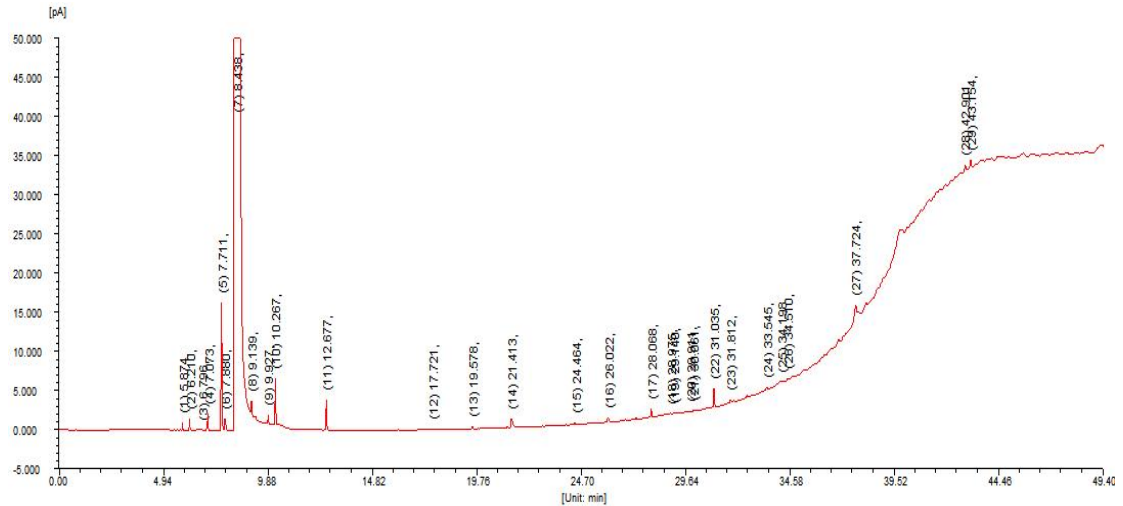


香叶醇

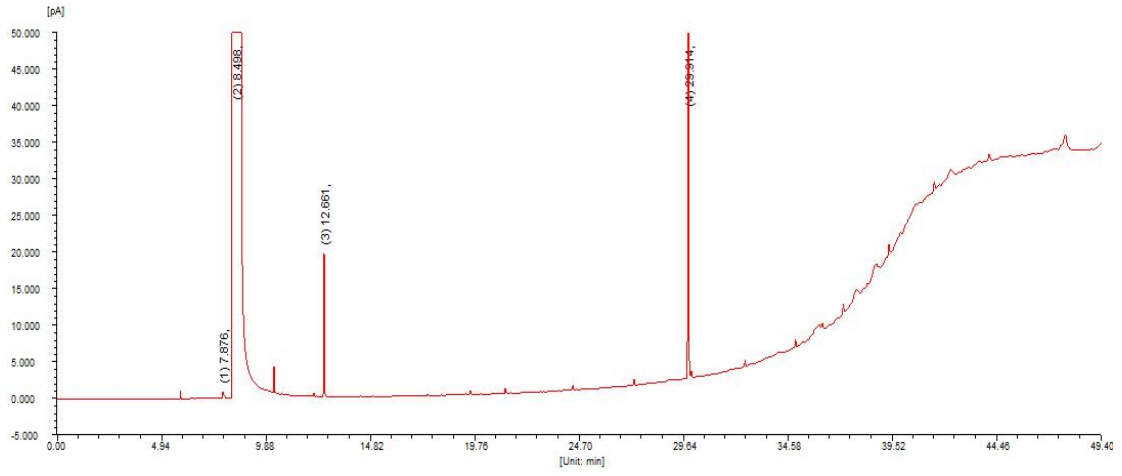


香茅醇

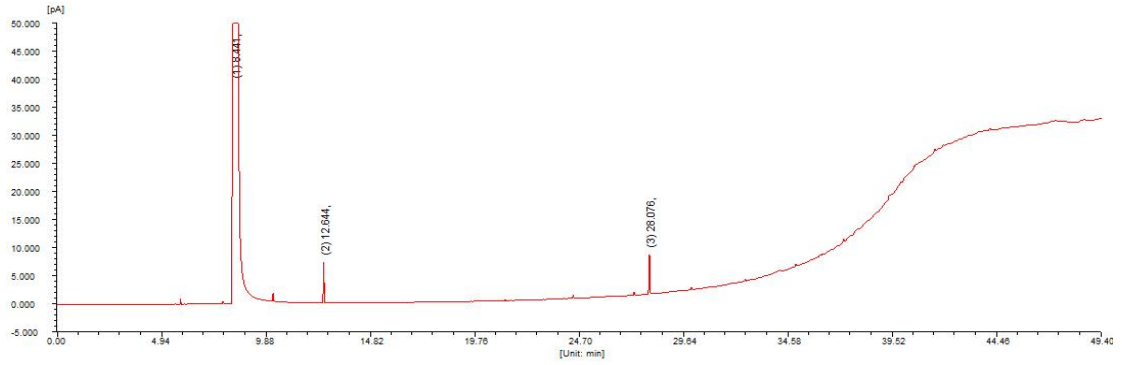

桂花醇

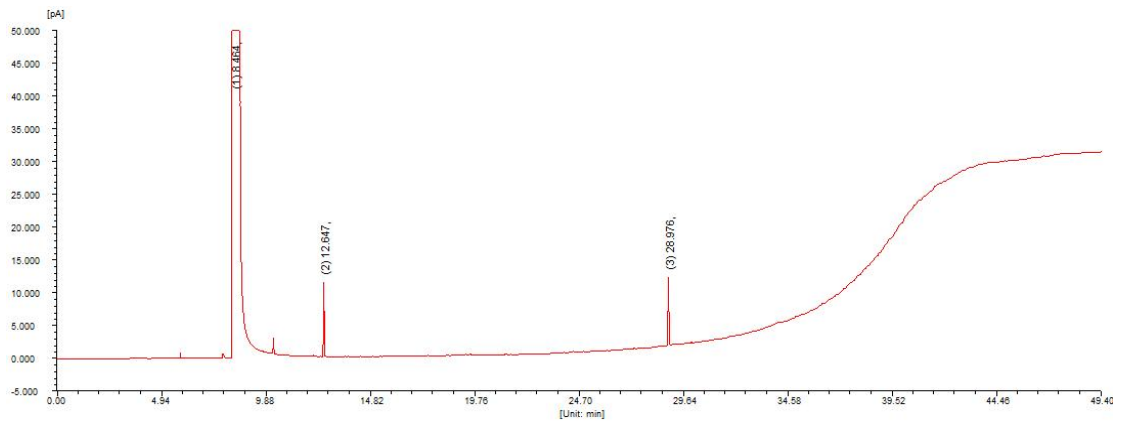

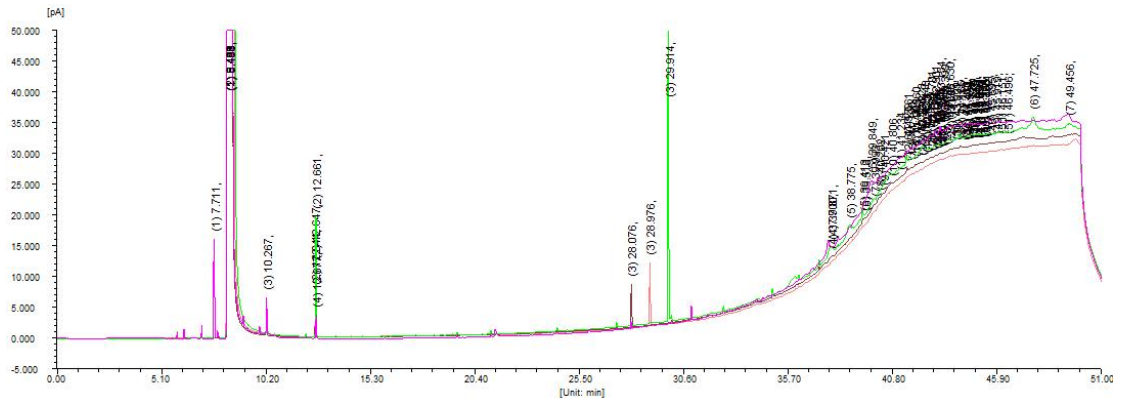

提取液局部放大图

