


硫酸鱼精蛋白

色谱柱: Chemalink AQ-C18-2 货号: D2F107

样品: 硫酸鱼精蛋白

样品制备: 取本品适量, 加0.01mol/L盐酸溶液并稀释制成1ml中约含0.5mg的溶液。

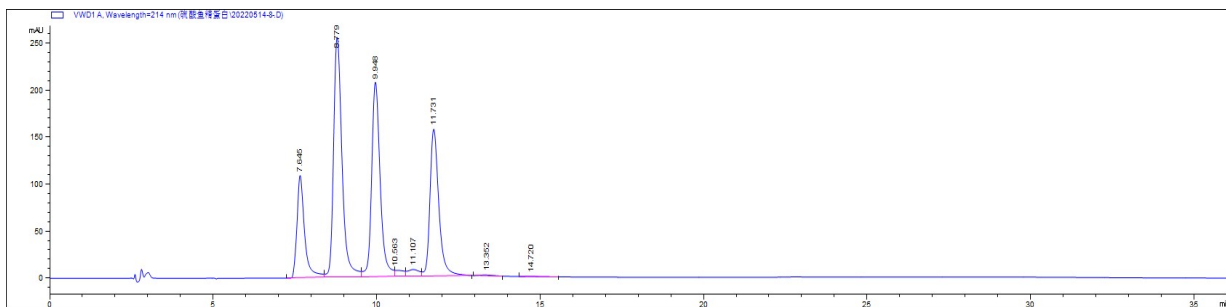

色谱条件:

检测器: UV 214 nm

流速: 1.0 mL/min


柱温: 55 °C

流动相A: 0.1mol/L磷酸二氢钠 (用磷酸调节pH值1.8)

流动相B: 0.1mol/L磷酸二氢钠 (用磷酸调节pH值1.8) -乙腈=93.5: 6.5

梯度表:

时间(min)	流动相A (%)	流动相B (%)
0	85	15
15	55	45
25	55	45
30	85	15

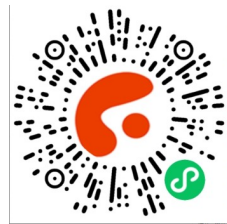

本应用案例详情