

果糖-葡萄糖-麦芽糖-麦芽三糖

色谱柱: Chemalink Sugar-Ca 7.8\*300mm 5μm

色谱条件:


流动相: 纯水

柱温: 80℃

流速: 0.3ml/min

检测器: RI 40℃

样品: 果糖-葡萄糖-麦芽糖-麦芽三糖混合样品 (进样20ul)

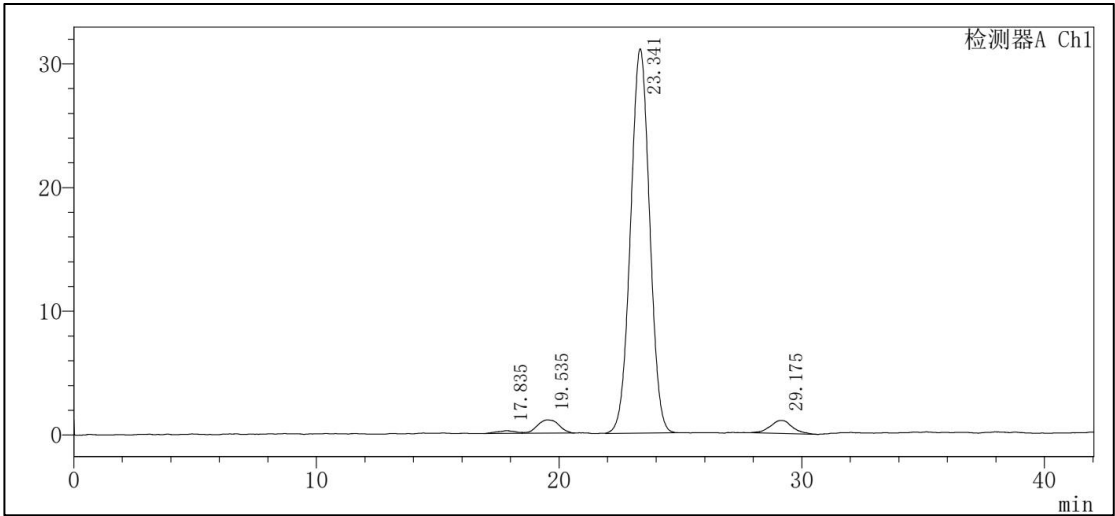

<峰表>

检测器A Ch1

| 峰号 | 保留时间   | 面积      | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 17.835 | 12052   | 235   | 1788       | --    | --       |
| 2  | 19.535 | 66718   | 1081  | 2477       | --    | 1.044    |
| 3  | 23.341 | 1700480 | 31078 | 4140       | 1.008 | 2.519    |
| 4  | 29.175 | 65321   | 1047  | 5835       | 1.033 | 3.917    |
| 总计 |        | 1844571 | 33441 |            |       |          |